



diasend® Uploader

تعليمات الاستخدام – لمستخدمي diasend®

glooko

٤	البحث عن جهازك
٥	كيفية البدء في استخدام diasend® Personal
٥	تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد على www.diasend.com
٥	تنزيل برنامج diasend® Uploader
٦	حفظ ملف التثبيت
٦	تحديد موقع ملف التثبيت وتشغيل الملف
٦	بدء diasend® Uploader
٧	توصيل كابل جهاز السكري الخاص بك بجهاز الكمبيوتر
٧	توصيل جهاز السكري بالكابل
٨	تسجيل الدخول على www.diasend.com لعرض بياناتك
٨	مشاركة بياناتك مع عيادة طبية
٩	عرض بياناتك التي تم تحميلها في تطبيق diasend® عبر الجوال
١٠	كيفية توصيل تطبيق الهاتف المحمول على جهازك ببرنامج diasend®
١٢	قائمة الأجهزة المتوافقة

البحث عن جهازك



جهاز قياس الجلوكوز

جهاز مراقبة الجلوكوز
(CGM) بشكل مستمر

مضخة الإنسولين

Abbott

FreeStyle.....	12
FreeStyle Flash	12
FreeStyle Freedom	12
FreeStyle Freedom Lite.....	12
FreeStyle InsuLinX.....	12
FreeStyle Lite	12
FreeStyle Mini	12
FreeStyle Optium	12
FreeStyle Optium H	12
FreeStyle Optium Neo.....	12
FreeStyle Papillon	12
FreeStyle Papillon InsuLinX.....	12
FreeStyle Papillon Lite	12
FreeStyle Papillon Mini	12
FreeStyle Papillon Vision	12
FreeStyle Precision	12
FreeStyle Precision H	12
FreeStyle Xido	12
Optium Mini	12
Optium Xceed.....	12
Optium Xido.....	12
Precision Xceed.....	12
Precision Xtra.....	12

FreeStyle Libre.....	12
FreeStyle Navigator II	12

Acon Laboratories

On Call® Sure.....	12
On Call® Sure Sync	12

Agamatrix

WaveSense Jazz	12
----------------------	----

Animas

IR1200	17
IR1250	17
2020	17
OneTouch Ping.....	17
Vibe	17

Arkray

GlucoCard 01.....	12
GlucoCard Expression.....	12
GlucoCard Shine.....	12
GlucoCard Shine Connex	12
GlucoCard Shine Express	12
GlucoCard Shine XL.....	12
GlucoCard Vital	12
ReliOn Confirm.....	12
ReliOn Premier Blu	12
ReliOn Premier Classic.....	12
ReliOn Premier Voice	12
ReliOn Prime.....	12

Ascensia/Bayer

Bayer Contour next	13
Breeze2.....	13
Contour.....	13
Contour care.....	13
Contour link.....	13
Contour next.....	13
Contour next link	13
Contour next link 2.4.....	13
Contour next One	13
Contour next USB.....	13
Contour plus.....	13
Contour plus One	13
Contour TS	13
Contour USB.....	13
Contour XT	13

B. Braun

Omnitest 3.....	13
Omnitest 5.....	13

Dexcom

G4 Platinum	13
G5 Mobile	9
G5 Receiver	13
SEVEN PLUS.....	13
Touchscreen Receiver (G5/G6).....	13

ForaCare

FORA Diamond Prima.....	13
-------------------------	----

GlucoRx

Nexus	13
Nexus mini	13
Nexus mini Ultra	13
Nexus Voice.....	13
Q.....	13

i-SENS

alphacheck professional.....	14
COOL/Bravo.....	14
CareSens Dual	14
CareSens N.....	14
CareSens N POP	14
CareSens N Premier	14
CareSens N Voice	14
CareSens Pro	14
CareSens N POP.....	14
NoCoding1 Plus BLE	14
Tee2 Plus	14

Insulet

OmniPod® System.....	17
OmniPod® DASH™ System.....	17

Intuity

POGO® Automatic™.....	14
-----------------------	----

LifeScan - OneTouch

Ping.....	14
Select Plus.....	14
Select Plus Flex	14
Ultra.....	14
Ultra2.....	14
UltraEasy	14
UltraMini	14
UltraSmart.....	14
Ultra Plus Reflect	14
Verio	14
Verio (old).....	14
Verio Flex	14
Verio IQ	14
Verio Pro	14
Verio Reflect.....	14
VerioSync.....	14
Vita	14

MedCore

Care.....	14
-----------	----

Medtrum

A6 TouchCare® System.....	10
---------------------------	----

Menarini

GlucoMen areo.....	14
GlucoMen areo 2K	14
GlucoMen Gm	14
GlucoMen LX2.....	14
GlucoMen LX Plus	14

Nipro

4SURE Smart	15
TRUE METRIX.....	15
TRUE METRIX AIR.....	15
TRUResult.....	15
TRUEyou.....	15
TRUEyou mini.....	15

Prodigy

AutoCode	15
----------------	----

Roche - Accu-Chek

Active.....	15
Aviva	16
Aviva Connect.....	15
Aviva Combo.....	16
Aviva Expert.....	16
Aviva Nano	16
Compact Plus	16
Guide.....	15
Guide Me	15
Instant.....	15
Mobile (IR)	16
Mobile (USB).....	15
Performa Connect	15

Insight.....	18
Spirit.....	18
Spirit Combo	18

Sanofi

BGStar.....	15
MyStar Extra	15

Senseonics

CGM Transmitter	15
-----------------------	----

Taidoc

4183.....	15
4206.....	15
4257	15
4289.....	15

Tandem

t:flex.....	17
t:slim.....	17
t:slim G4.....	17
t:slim X2	17

ViCentra

Kaleido.....	17
--------------	----

Wellion

Calla Mini	15
------------------	----

Ypsomed

mylife Pura	15
mylife Unio.....	15

mylife OmniPod	17
mylife YpsoPump.....	10

نبذة عن diasend®

diasend® Personal خدمة مجانية تمامًا لمرضى السكري الذين يرغبون في مراقبة الجلوكوز، ومراقبة الجلوكوز بشكل مستمر (CGM)، والإنسولين من المنزل.


لتحميل البيانات من جهاز (أجهزة) السكري الخاصة بك، تحتاج أولاً إلى إنشاء حساب وتنزيل برنامج *diasend® Uploader*.

كيفية البدء في استخدام diasend® Personal

1 تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد على www.diasend.com



2 تنزيل برنامج diasend® Uploader

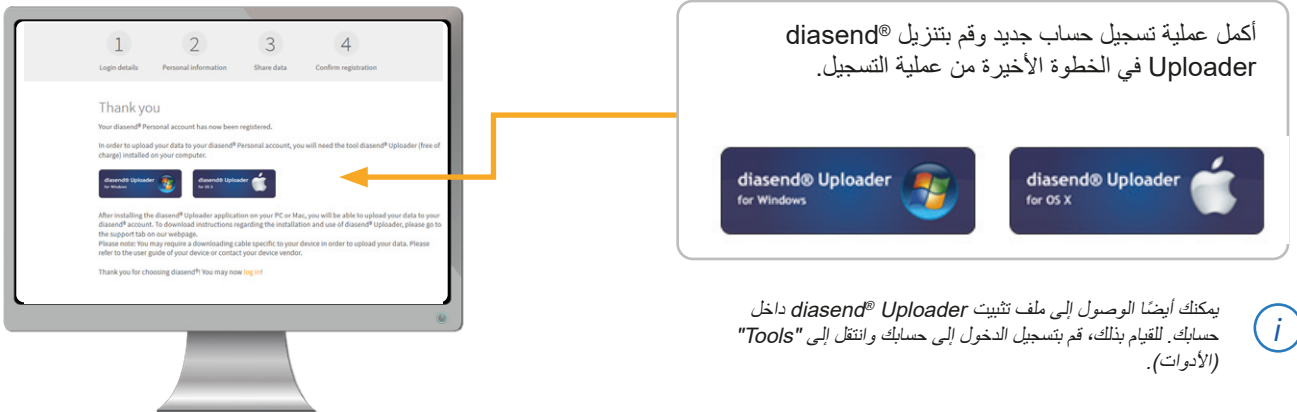

3 حفظ ملف التثبيت

3



You have chosen to open:

DiasendUploaderPatient2.4.0_BuildR2e02.exe

Which is a: binary file (16,2 MB)

From: <https://www.diasend.com>

Would you like to save this file?

Save File


Cancel



أنظمة التشغيل المتوافقة:
Windows 7، و ٨، و ١٠
macOS 10.9-10.14

4 تحديد موقع ملف التثبيت وتشغيل الملف

4

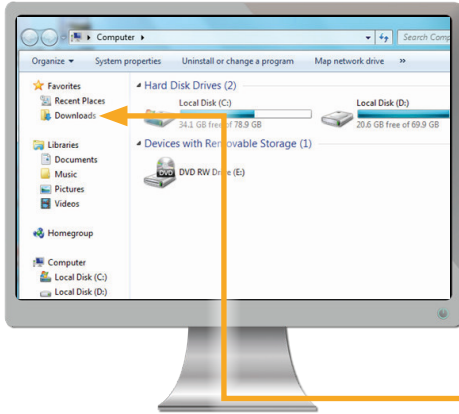

اعتمادًا على مستعرض الويب الخاص بك قد تحتاج إلى البحث عن ملف التثبيت الذي تم تنزيله.
أو قد تظهر لك فقط النافذة المنبثقة لتشغيل الملف.

إذا كنت من مستخدمي جهاز الكمبيوتر:
ابحث في مجلد التنزيلات الأخيرة الخاص بك.

إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل Mac:
ابحث في مجلد التنزيلات في "Finder" (أداة البحث).

بمجرد تحديد موقع الملف، انقر نقرًا مزدوجًا عليه وقم باتباع إرشادات التثبيت التي تظهر على الشاشة.

5 بدء تشغيل diasend® Uploader

5




انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز diasend® Uploader الموجود على سطح المكتب الخاص بك لبدء البرنامج.



تأكد من أنك قمت بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك قبل بدء تشغيل diasend® Uploader للمرة الأولى.

6 توصيل كابل جهاز السكري الخاص بك بجهاز الكمبيوتر

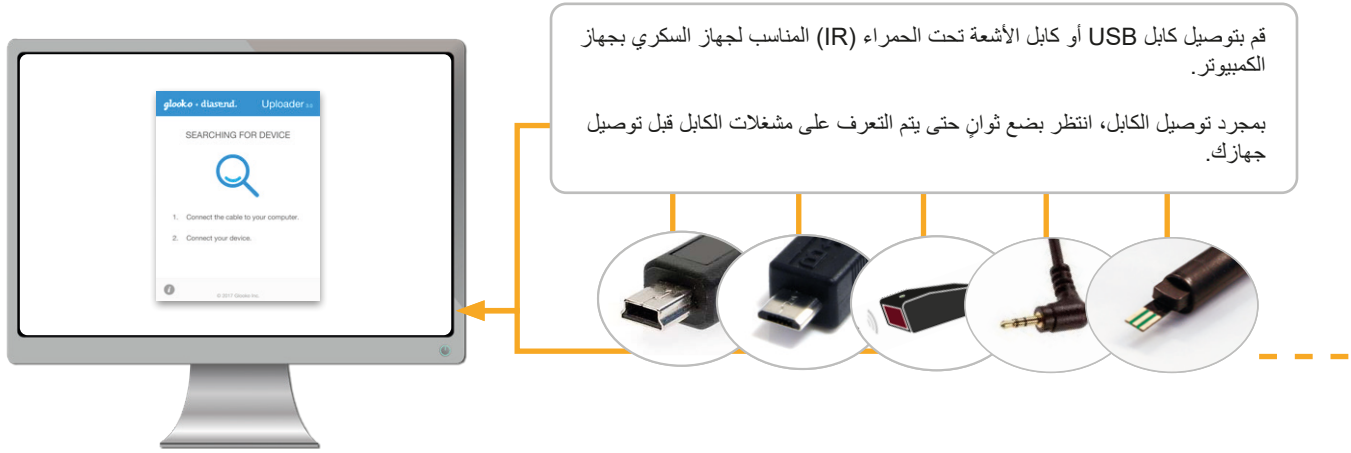

قم بتوصيل كابل USB أو كابل الأشعة تحت الحمراء (IR) المناسب لجهاز السكري الكمبيوتر.

بمجرد توصيل الكابل، انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم التعرف على مشغلات الكابل قبل توصيل جهازك.


هل الكابل مفقود؟
يرجى الاتصال بالشركة المصنعة لجهاز السكري الخاص بك.




تأكد من استخدام الكابل المرفق مع جهاز السكري الخاص بك.



7 توصيل جهاز السكري بالكابل

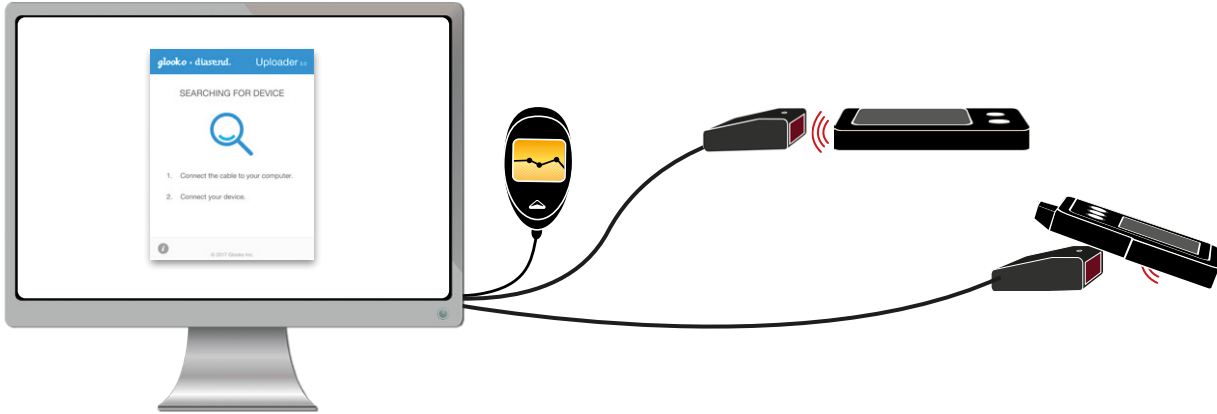

8 تحميل البيانات من جهاز السكري الخاص بك

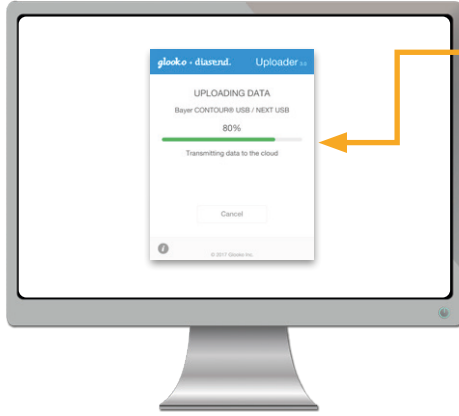


في المرة الأولى التي تقوم فيها بتحميل بيانات من أحد الأجهزة، قد يُطلب منك إثبات صحة حساب المستخدم الخاص بك. يرجى إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لاستكمال التحميل وتعيين الجهاز إلى حسابك.

تتطلب مضخات Animas® ومقاييس Roche Accu-Chek® كابل تنزيل لاسلكي للأشعة تحت الحمراء (IR) من Actisys (ACT-IR224UN-Li). سيحتاج مرضى Animas® في Windows ٨، و ١٠ إلى كابل مخصص (ACT-IR224UN-Li2).

يتوافق أيضًا كابل 360 USB Accu-Chek® مع أجهزة Accu-Chek® للأشعة تحت الحمراء (IR). تتطلب جميع الأجهزة الأخرى كابل USB الخاص بها.

9 تسجيل الدخول على www.diasend.com لعرض بياناتك

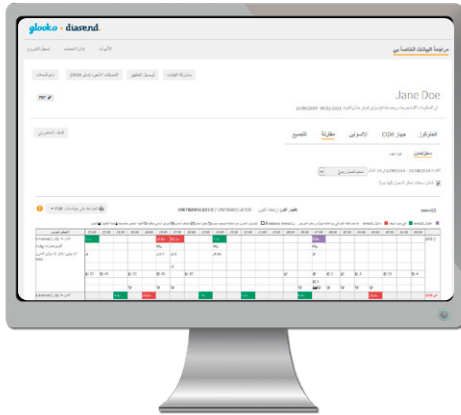


يتم عرض جميع بياناتك التي تم تحميلها في جداول ورسومات بيانية سهلة الفهم. يرجى الرجوع إلى **Report reference guide (الدليل المرجعي للتقارير)** في موقع الويب الخاص بنا للاطلاع على مزيد من المعلومات.

تنقسم التقارير إلى علامات التبويب التالية:

التجميع **مقارنة** **الإنسولين** **جهاز CGM** **الجلوكوز**

10 مشاركة بياناتك مع عيادة طبية

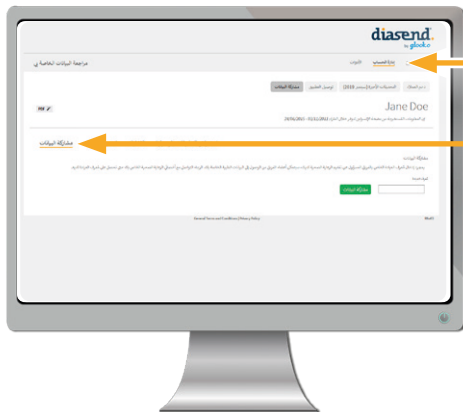

يمكنك مشاركة بياناتك مع موفر الرعاية الصحية الخاص بك عن طريق إدخال معرف العيادة، أسفل علامتي التبويب **Account admin** و **Share data**. لا تنسَ أن تنقر فوق **Update**.

إدارة الحساب

مشاركة البيانات

مُعرف العيادة

مشاركة البيانات

عرض بياناتك التي تم تحميلها في diasend® Mobile app



قم بتنزيل التطبيق من Google Play أو App Store.

قم بتسجيل الدخول باستخدام تفاصيل diasend® Personal الخاصة بك أو قم بإنشاء حساب جديد.



باستخدام diasend® Mobile app ستحصل على:

- ملخص جيد لأحدث البيانات التي تم تحميلها.
- تقارير سهلة الفهم عن جرعة الإنسولين ومستويات الجلوكوز الخاصة بك مع مرور الوقت.
- إمكانية تحميل البيانات مباشرة باستخدام هاتفك الذكي - إذا كان جهاز السكري والهاتف الخاص بك يدعمان تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) أو ميزة الطاقة المنخفضة من Bluetooth (BLE).
- تهيئة كبيرة على حساب diasend® Personal الخاص بك على www.diasend.com.




كيفية توصيل تطبيق الهاتف المحمول على جهازك ببرنامج diasend® - مزامنة بيانات مرض السكري الخاصة بك بسهولة في حساب diasend®

يتوفر هذا الاتصال مع التطبيقات التالية:

- Dexcom G5/G6
- Libre Link (متوفر خارج الولايات المتحدة)
- Eversense (متوفر خارج الولايات المتحدة)
- Medtrum Easy Touch (A6 TouchCare® System)
- mylife™ App (mylife™ YpsoPump®)

المتطلبات:

- حساب في diasend® Personal – مجاني للمرضى!
- هاتف ذكي يعمل بنظام Android أو iPhone.

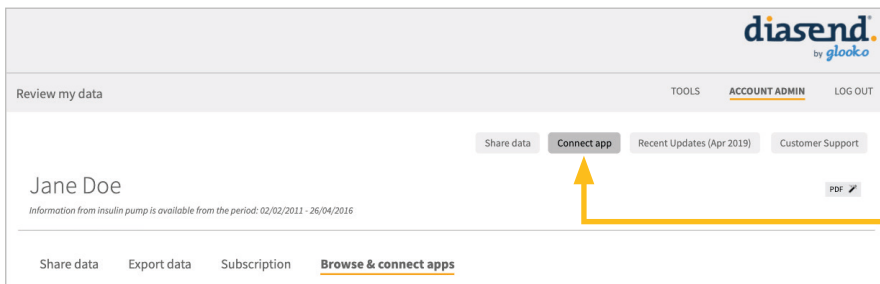

قم بتسجيل الدخول إلى حساب diasend® Personal الخاص بك وانقر على الزر توصيل التطبيق.



توصيل التطبيق

انقر على رابط الاتصال الخاص بتطبيق المختار.



دعم العملاء | التحديثات الأخيرة (سبتمبر 2018) | توصيل التطبيق | مشاركة البيانات

Jane Doe

PDF

استعراض التطبيقات وتوصيلها | الاشتراك | تصدير البيانات | مشاركة البيانات

"مهم: يمكن أن تتطلب عملية ظهور البيانات في التقارير الخاصة بك على diasend عدة ساعات أو تتناثر حتى ظهور فجر اليوم التالي وذلك بعد قيامك بالاتصال جاريًا. وفقًا للجهاز المسؤول عن تتبع القياسات الخاصة بالخطوة البدنية يتم حينها إدخال البيانات الخاصة بجهازك هذا تلقائيًا إلى نظام diasend مرة واحدة في اليوم على الأقل وذلك عندما تكون البيانات الجديدة متوفرة."

Fitbit

Fitbit offers wearable devices to help you lead a healthier, more active life.

توصيل

Runkeeper

The Runkeeper app is a personal trainer in your pocket.

توصيل

Dexcom (G5 Mobile / G6 app)

إن نظام Dexcom يستخدم مستشعر وتطبيق لمراقبة مستويات الجلوكوز لديك بصفة مستمرة وتحديد اتجاهاتها لإدارة مستوى أفضل من التحكم بها.

توصيل

Abbott FreeStyle LibreLink

The FreeStyle Libre sensor is read via the FreeStyle LibreLink app on your Android smartphone or iPhone. Connecting your LibreView account to your diasend® account means that your data will continuously sync with diasend.

توصيل

Medtronic

يجمع نظام 660 TouchCare بين الصفحة اللاحقة Patchpump ومستشعر المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) لإرسال البيانات إلى مدير السكري الشخصي (PDM) ومن ثم إلى تطبيق EasySense (أو تطبيق EasySense إذا كنت تستخدم مستشعر المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) مستطلي) على الهواتف الذكية التي تعمل بالنظام Android أو iOS. عندما تقوم بتوصيل حساب EasySense الخاص بك بـ diasend، فسيتم تحميل البيانات بشكل مستمر وتلقائي إلى حسابك.

توصيل

mylife™ App / mylife™ Cloud

سكّلي الدخول باستخدام بيانات اعتماد سحابة mylife™ Cloud ولديك وصولها بحساب diasend الخاص بك. تجمع بمراسمة بياناتك العلاجية في جميع الأوقات، حيث لا يهم ما إذا كنت قد سجلت بياناتك مع تطبيق mylife™ أو برنامج mylife™.

توصيل

Eversense

The Eversense Mobile Application works with the Eversense Continuous Glucose Monitoring System. The mobile app provides easy access to CGM data and eliminates the need to carry a dedicated receiver device.

توصيل

الاتصال

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بالتطبيق لاعتماد التطبيق المختار وإضافته إلى حساب diasend® Personal الخاص بك.



Your Account

Sign in to manage your account.

Username *

Password *

Login

[Forgot your username or password?](#)

من الآن فصاعدًا، البيانات الموجودة على هاتفك سوف تظهر في حساب diasend® Personal ويمكن مشاركتها بسهولة مع العيادة.

يرجى ملاحظة أن

LibreLink


إذا لم يكن لديك هاتف Android أو iPhone، يمكنك تحميل البيانات إلى diasend باستخدام القارئ FreeStyle Libre. بعدئذ يمكنك ببساطة استخدام البرنامج diasend® Uploader على الكمبيوتر وتوصيل القارئ FreeStyle Libre باستخدام كابل micro USB بالكمبيوتر. إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بحسابك في diasend، فستظهر بيانات FreeStyle Libre مع المعلومات على الأجهزة الإضافية. FreeStyle LibreLink هو تطبيق للأجهزة المحمولة، قامت بتطويره وتوزيعه شركة Abbott. يتطلب استخدام FreeStyle LibreLink التسجيل باستخدام LibreView، وهي خدمة مقدمة من شركة Abbott. ويتوافق تطبيق The FreeStyle LibreLink مع هواتف Android المزودة بتمكين تقنية NFC والتي تعمل بنظام تشغيل OS 5.0 أو الأحدث - بالإضافة إلى iPhone 7 أو الأحدث التي تعمل بنظام التشغيل iOS 11 أو الأحدث.

Eversence

إذا كانت لديك أجهزة أخرى متصلة بحسابك في diasend، فستظهر بيانات Eversence مع المعلومات من الأجهزة الإضافية.

قائمة الأجهزة المتوافقة

فيما يلي قائمة بالأجهزة المتوافقة مع diasend®. ما لم يتم توفير تعليمات تحميل واضحة للجهاز الفعلي، كل ما تحتاجه هو توصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر / Mac الخاص بك باستخدام كابل USB الخاص به وسيقوم بالتحميل تلقائيًا. (قم بزيارة diasend.com للاطلاع على قائمة حالية بالأجهزة المتوافقة والقيود المعروفة).

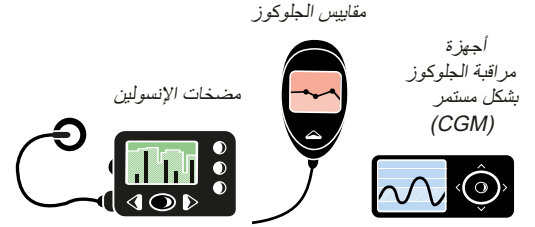

يُرجى ملاحظة أنه قد تكون بعض أجهزة قياس السكري التالية غير متوفرة في السوق.



مقاييس الجلوكوز وأجهزة مراقبة الجلوكوز بشكل مستمر (CGM) - الموصلة بكابل USB

Abbott

FreeStyle FreeStyle Flash FreeStyle Freedom FreeStyle Freedom Lite FreeStyle Lite FreeStyle Mini FreeStyle Optium	FreeStyle Optium H FreeStyle Papillon FreeStyle Papillon Lite FreeStyle Papillon Mini FreeStyle Papillon Vision FreeStyle Xido Optium Mini
---	--



Abbott FreeStyle USB
(2,5 mm)

FreeStyle InsuLinx FreeStyle Libre	FreeStyle Optium Neo FreeStyle Papillon InsuLinx
---------------------------------------	---

Micro USB



FreeStyle Navigator II

Mini USB



FreeStyle Precision FreeStyle Precision H Optium Xceed	Optium Xido Precision Xceed Precision Xtra
--	--

Abbott Xceed USB



Acon Laboratories

On Call® Sure
On Call® Sure Sync

On Call USB
(2,5 mm)



Agamatrix

WaveSense Jazz

AgaMatrix USB



Arkray

Glucocard 01 Glucocard Vital	Relion Confirm Relion Prime
---------------------------------	--------------------------------

Arkray USB
(2,5 mm)



Glucocard Shine Glucocard Shine XL ReliOn Premier Blu	ReliOn Premier Classic ReliOn Premier Voice
---	--

i-Sens USB
(2,5 mm)



قم بالتوصيل والضغط على أي زر.

Glucocard Shine Connex
Glucocard Shine Express

Micro USB




Glucocard Expression

Medcore Care + GlucoCard Expression USB
(3,5 mm)



قم بالتوصيل وتحديد PC Link في القائمة الرئيسية على جهاز القياس.

مقاييس الجلوكوز وأجهزة مراقبة الجلوكوز بشكل مستمر (CGM) - الموصلة بكابل USB

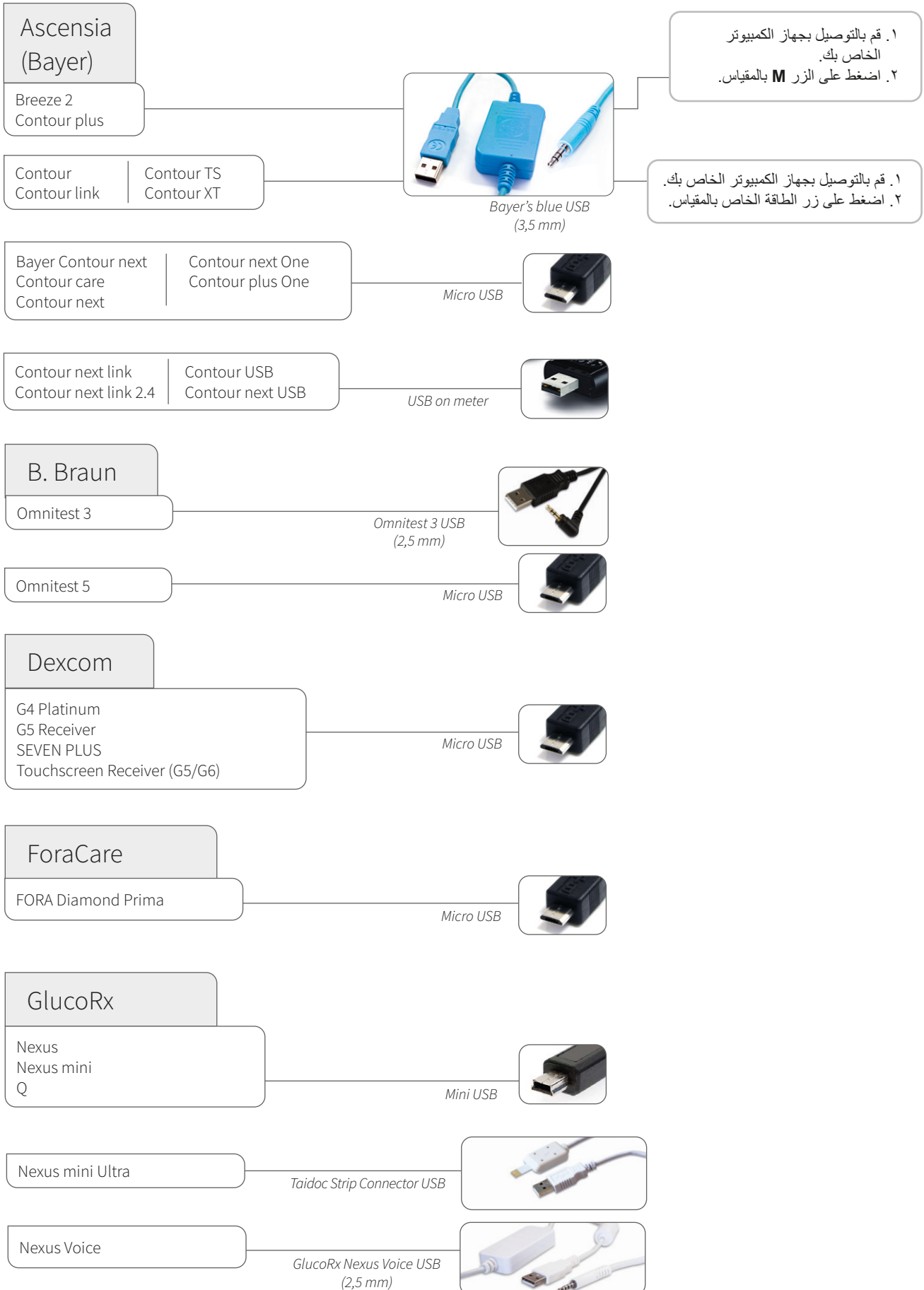

مقاييس الجلوكوز وأجهزة مراقبة الجلوكوز بشكل مستمر (CGM) - الموصلة بكابل USB

i-SENS

Alphacheck professional

Mini USB



CareSens COOL/Bravo
CareSens Dual
CareSens N
CareSens N POP
CareSens N Premier

CareSens N Voice
CareSens Pro
CareSens TEE2 Plus
NoCoding1 Plus BLE



i-Sens USB
(2,5 mm)

١. قم بالتوصيل بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
٢. اضغط على الزر **S** بالمقياس.

Intuity

POGO® Automatic™

Micro USB



LifeScan

OneTouch Ping

Mini USB



١. قم بالتوصيل بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
٢. اضغط على زر الطاقة الخاص بالمقياس.

OneTouch Select Plus
OneTouch Select Plus Flex
OneTouch Ultra Plus Reflect

OneTouch Verio
OneTouch Verio Flex
OneTouch Verio Reflect

Micro USB



OneTouch Verio IQ
OneTouch Verio Pro
OneTouch Verio Sync

Mini USB



OneTouch Ultra
OneTouch Ultra2
OneTouch UltraEasy

OneTouch UltraMini
OneTouch Verio (old)
OneTouch Vita

LifeScan USB
(2,5 mm)



OneTouch UltraSmart

LifeScan USB
(2,5 mm)

١. قم بالتوصيل بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
٢. اضغط على الزر الاسود الأيسر.

MedCore

Care

Medcore care USB
(3,5 mm)



١. قم بالتوصيل بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
٢. اضغط على زر الطاقة الخاص بالمقياس.

Menarini

Glucomen areo
Glucomen areo 2K

Menarini Glucomen areo USB
(2,5 mm)



Glucomen Gm

Menarini white USB
(2,5 mm)





Glucomen LX Plus
Glucomen LX2

Menarini blue USB
(3,5 mm)



إذا كان جهاز القياس يعرض: **E-3**، قم بفصله وانتظر حتى يتم إيقاف تشغيل شاشة العرض، ثم قم بتوصيل جهاز القياس مرة أخرى.

مقاييس الجلوكوز وأجهزة مراقبة الجلوكوز بشكل مستمر (CGM) - الموصلة بكابل USB

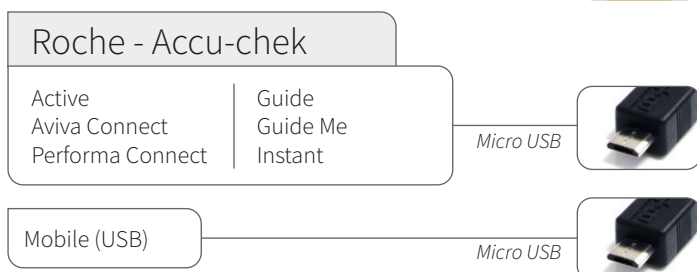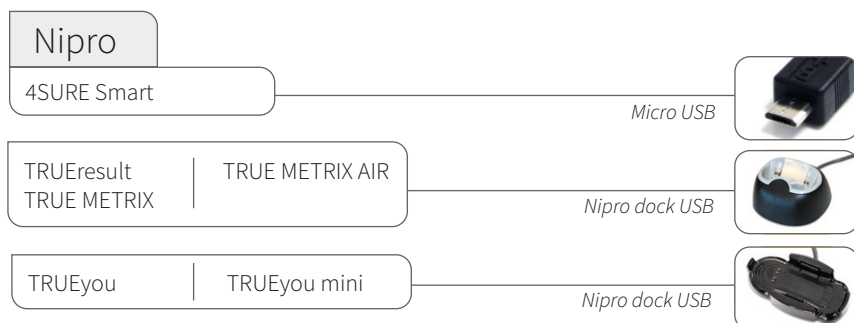


١. قم بالتوصيل بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
٢. ينبغي أن يبدأ التحميل في غضون ٢٠ ثانية بعد توصيل الكابل.
إذا لم يحدث ذلك، فانقل إلى القائمة الرئيسية في المقياس.
وانقل إلى **Data < PC analysis < My data**
Transfer، وقم بتوصيل المقياس بكابل USB مرة أخرى.
(يرجى عدم الضغط باستمرار على زري الأسهم.)



ملاحظة!
لا يمكن تحميل بيانات نظام Eversense Smart CGM Transmitter عبر برنامج diasend® Uploader.



لا يمكن تحميل البيانات المرسلة من نظام Eversense CGM إلى diasend® إلا عبر تطبيق "Connect app" الموجود على حساب diasend® الخاص بالمرضى. الرجاء الرجوع إلى صفحة ١٠ في هذا الدليل.

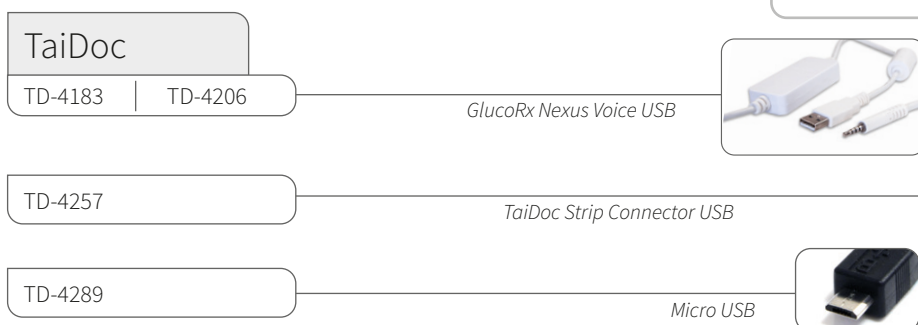


مقاييس الجلوكوز بالأشعة تحت الحمراء



Roche (IR)

Accu-Chek Aviva
Accu-Chek Nano

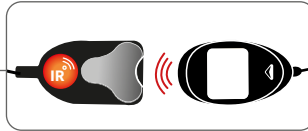

Accu-Chek 360° أو Li2، أو ACTiSYS Li

١. قم بتوصيل كابل الأشعة تحت الحمراء (IR) بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
٢. قم بتنشيط النقل بالأشعة تحت الحمراء (IR) بالضغط مع الاستمرار على زري الأسهم حتى يظهر السهمان على الشاشة.


Accu-Chek Compact Plus



Accu-Chek 360° أو Li2، أو ACTiSYS Li

١. قم بتوصيل كابل الأشعة تحت الحمراء (IR) بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
٢. قم بتنشيط النقل بالأشعة تحت الحمراء (IR) بالضغط مع الاستمرار على الزرين **M** و **S** أسفل الشاشة حتى يظهر السهمان على الشاشة.


Accu-Chek Aviva Combo
Accu-Chek Aviva Expert

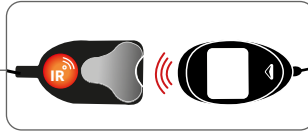

Accu-Chek 360° أو Li2، أو ACTiSYS Li

١. قم بتوصيل كابل الأشعة تحت الحمراء (IR) بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
٢. في القائمة الرئيسية، انتقل إلى **My data** وحدد **Data transfer**.

Accu-Chek Mobile (IR)

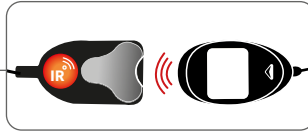


Accu-Chek 360° أو Li2، أو ACTiSYS Li

١. قم بتوصيل كابل الأشعة تحت الحمراء (IR) بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.
٢. اضغط مع الاستمرار على زري الأسهم.
٣. في قائمة **data transfer**، حدد البديل الأول **(for analysis)**.

كابلات الأشعة تحت الحمراء المتوافقة




كابل ACTiSYS - Li

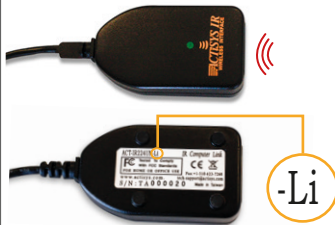

أنظمة التشغيل المتوافقة:
macOS X: 10.9-10.14
Windows: 7

كابل ACTiSYS - Li2

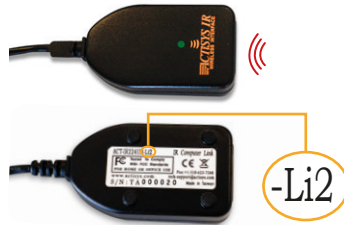

أنظمة التشغيل المتوافقة:
macOS X: 10.9-10.14
Windows: 7, 8, 10

كابل Accu-Chek - 360° (Realtyme)




أنظمة التشغيل المتوافقة:
macOS X: 10.9-10.14
Windows: 7, 8, 10

هل الكابل مفقود؟


يرجى الاتصال بالشركة المصنعة لجهاز السكري الخاص بك.



مضخات الإنسولين - الموصلة بكابل USB قياسي

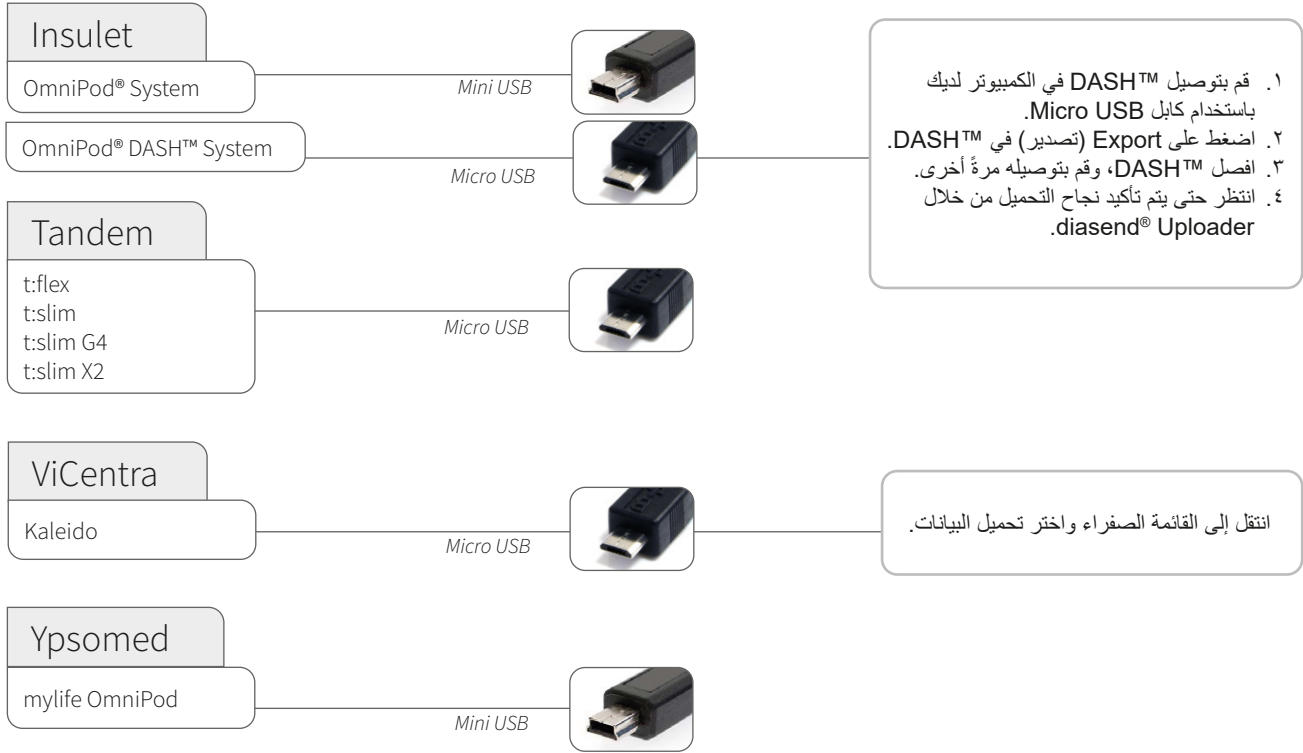

مضخات الإنسولين بالأشعة تحت الحمراء

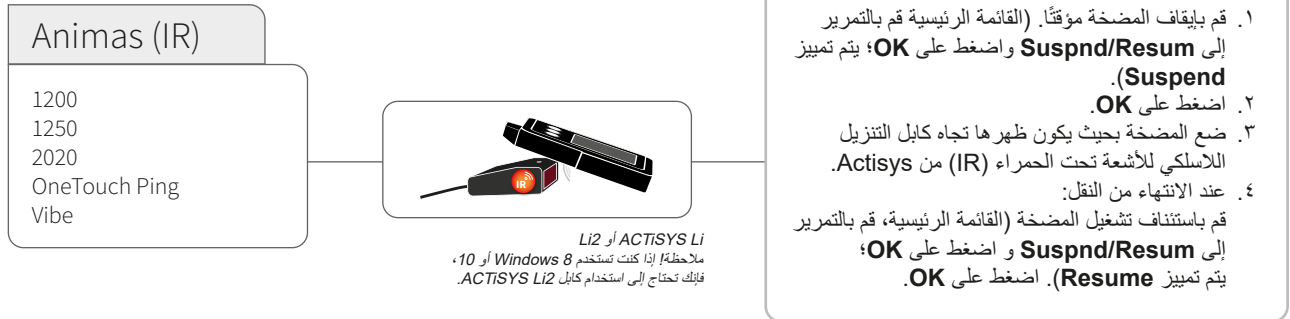


كابلات الأشعة تحت الحمراء المتوافقة



هل الكابل مفقود؟
يرجى الاتصال بالشركة المصنعة
لجهاز السكري الخاص بك.



Roche
Accu-Chek Insight

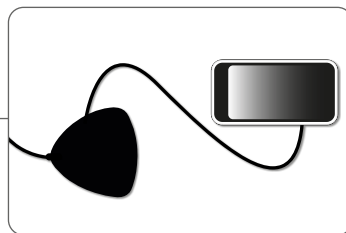

Smart Pix 2
ملاحظة! قم بتوصيل جهاز التحكم المحمول الخاص
بالمضخة باستخدام كابل micro USB بجهاز
Smart Pix 2.

١. قم بتوصيل كابل Smart Pix 2 بجهاز الكمبيوتر الخاص بك وانتظر حتى يبدأ المؤشر الأزرق الموجود في Smart Pix 2 في الوميض ببطء.
٢. قم بتوصيل جهاز التحكم المحمول بجهاز Smart Pix 2 باستخدام كابل micro USB.
٣. في قائمة جهاز التحكم المحمول حدد **Connect to PC** واضغط على **OK**.
٤. تأكد من وجود المضخة بالقرب من جهاز التحكم المحمول.
٥. يكون المؤشر الأزرق الموجود في Smart Pix 2 في حالة تشغيل أثناء نقل البيانات من الجهاز إلى Smart Pix 2.
٦. يتوقف المؤشر الأزرق عن التشغيل ذاتيًا ويصدر كل من Smart Pix 2 والجهاز صوتًا للإشارة إلى أن البيانات يتم نقلها من Smart Pix 2 إلى Uploader. لا تقم بفصل Smart Pix 2 حتى هذه اللحظة!
٧. انتظر حتى يشير Uploader إلى نجاح التحميل.

Roche
Accu-Chek Spirit
Accu-Chek Spirit Combo



Smart Pix 2 أو Smart Pix
ملاحظة! هناك حاجة إلى برنامج Smart Pix
إصدار 3.02 أو أعلى عند استخدام Smart Pix.

١. قم بتوصيل Smart Pix بجهاز الكمبيوتر الخاص بك وانتظر حتى يبدأ المؤشر الأزرق الموجود في Smart Pix في الوميض ببطء.
٢. ضع المضخة في وضع **Data Transfer mode** (أوقف المضخة وقم بالدخول إلى قائمة **Data Transfer**).
٣. ضع المضخة بحيث تكون عين الأشعة تحت الحمراء (IR) الخاصة بها تجاه Smart Pix. يشير المؤشر الأزرق إلى أنه يتم إرسال البيانات إلى Smart Pix.
٤. انتظر حتى يبدأ المؤشر الأزرق في الوميض ببطء مرة أخرى أو يتوقف عن الوميض تمامًا.
٥. يتم الآن نقل البيانات من Smart Pix إلى Uploader. لا تقم بفصل Smart Pix حتى هذه اللحظة!
٦. انتظر حتى يشير Uploader إلى نجاح التحميل.

كابلات الأشعة تحت الحمراء المتوافقة



كابلات Roche Accu-Chek Smart Pix



أنظمة التشغيل المتوافقة:
macOS X: 10.9–10.13
Windows: 7, 8, 10

كابلات Roche Accu-Chek Smart Pix 2



أنظمة التشغيل المتوافقة:
macOS X: 10.9–10.13
Windows: 7, 8, 10

هل الكابل مفقود؟

يرجى الاتصال بالشركة المصنعة لجهاز السكري الخاص بك.





تحذير!

استشر دائماً الممارس العام الخاص بك إذا اكتشفت أي مغارقات في المعلومات المعروضة في diasend®. لا تتم مطلقاً بتغيير جرعات الأدوية قبل استشارة الممارس العام الخاص بك! سيتم إجراء جميع التشخيصات والمعالجات الطبية للمرضى تحت إشراف متخصصين مؤهلين في مجال الرعاية الصحية! diasend® غير مصمم لتقديم قرارات علاج مؤتمتة أو لن يتم استخدامه كبديل لقرارات الرعاية الصحية المتخصصة. diasend® غير مصمم لإجراء مكالمات الطوارئ أو لنقل أي تنبيهات بالوقت الفعلي أو بيانات بالوقت الحرج أو الإشارة إليها! diasend® غير مصمم كبديل للإشراف الطبي المباشر أو التدخل في حالات الطوارئ.



Glooko AB
Nellickevägen 20
412 63 Göteborg
SWEDEN

الدعم
+46 (0)31-762 08 88
support@diasend.com
www.diasend.com

glooko

A2035v16Q IFU_ar_diasend-uploader (2019-12-02)

تم تصميم diasend® م ليتم استخدامه من قبل الأفراد أو المتخصصين في مجال الرعاية الصحية في المنزل أو مرافق الرعاية الصحية لنا لقلبيانات من أجهزة المراقبة تلمنزلية مثل مقاييس الجلوكوز ومضخات الأنسولين إلى قاعدة بياناتنا لتلخاذه لدعم إدارة مرض السكري. تم تصميم diasend® م للاستخدام الاحترافي والمبيعا تلمتاحة دون وصفة.